

# Clean Basket Shell

# Clean Basket ARM

Clean Basket Shell

使う人の事を最優先に考えた  
安心・安全な洗浄バスケット。

アミ端部に直接指が触れる事を  
極力なくした安全設計！  
ケガによるキズ口からの  
感染などを未然に防止します！



## Clean Basket Shell



シリコンバー

Clean Basket Shellは、ロック式のフタを装備した、洗浄中に器具が飛散することを防ぐ洗浄バスケットです。  
フタにシリコンバーを取り付ければ、器具をより安定した状態で洗浄でき、先端がデリケートな鋼製小物等の破損や変形を抑制します。

## Clean Basket ARM



シリコンアタッチメント  
ARM用

Clean Basket ARMは、手術ロボットのアームを最高6本まで洗浄できる大型洗浄バスケットです。  
シリコンアタッチメント ARM用を取り付ける事で、バスケットに固定した状態で洗浄でき、アーム先端の変形等を抑制します。  
複数のアームを一気に滅菌することで、作業スピードも格段にアップします！

※シリコンバー、シリコンアタッチメントは別売りとなっております。Clean Basket Shell、Clean Basket ARM には付属しませんのでご注意ください。



安心  
安全

全てのアミ端部は直接指が触れる事を極力なくした安心設計で、ケガによるキズ口からの感染を未然に防止します。



安心  
安全

ロック式のフタで、洗浄中も水圧でフタが開くことなく、器具の飛散を防ぎます。  
つまみが大きめなので、開け閉めもスムーズにできます。



強く  
丈夫!!

バスケット網は丈夫な線径1.0mmの平織網を使用。  
アミ切れ部分によるケガや器具の破損を未然に防ぎます。



使い  
やすい!!

バスケットはスタッキングも可能。  
重ねても崩れる心配がないので、未使用時も効率的に収納ができます。

CB-028

### クリーンバスケットシェル

- 外形寸法：W484 × D247 × H60mm
- 耐荷重量：約 5.0kg
- 製品重量：約 3,000g
- 材質：18-8 ステンレス（電解研磨処理）
- 金網仕様：平織網（Φ1.0）
- 生産国：日本製

CB-029

### クリーンバスケットアーム

- 外形寸法：W680 × D325 × H99mm
- 耐荷重量：約 5.0kg
- 製品重量：約 6,200g
- 材質：18-8 ステンレス（電解研磨処理）
- 金網仕様：平織網（Φ1.0）
- 生産国：日本製



※シリコンパーツを取り付けた状態で、過酸化水素を用いた滅菌を行うと、シリコン部分に過酸化水素が残留する恐れがありますので、ご注意ください。



# Clean Basket 用 シリコンバー/シリコンアタッチメント

## 洗浄バスケットに嵌め込むだけ！ 大切な医療器具を守ります

洗浄する器具の形状に合わせてレイアウトを自由に変えることができ、先端のデリケートな器具を固定した状態で洗浄できるシリコン製のアタッチメントです。

株式会社シンドー製の洗浄バスケット「Clean Basket」「Clean Basket Shell」「Clean Basket ARM」に共通して使用できます。

※金網が「平織網（Φ1.0mm 開口4.08mm）5m/s」のバスケットが対象となります。

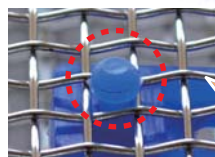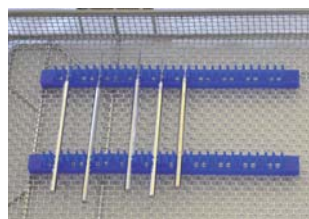


突起を網目に嵌め込むだけ！  
取外し簡単!!

### シリコンバー




器具を上下から挟み込むように固定することで、器具が傷つく危険性を大幅に削減します。裏側には穴が開いているので、フタに取り付けて洗浄しても水を遮りません。

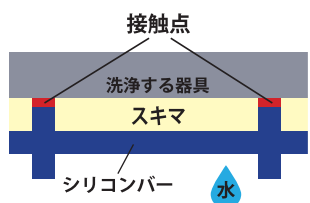


洗浄する器具をシリコンバーに置いた際、「面」ではなく「点」で接触するので、表面張力による水切れの悪さが解消され、器具がより速く乾燥します。

### シリコンアタッチメント

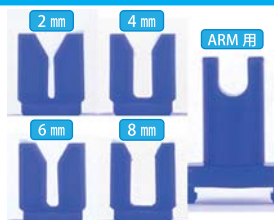

シリコンアタッチメントは、キャッチの溝の幅が2mm、4mm、6mm、8mmのものと、ARM用の計5種類がございます。器具のサイズに合わせてお選びいただけます。

キャッチ部分が360°回転し、曲がった形状の器具でも角度調節してしっかり固定できます。器具に合わせてキャッチを取り外しする手間も省けます。

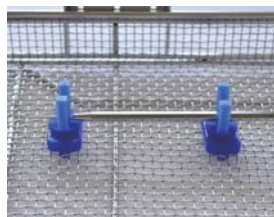

キャッチの幅が違うシリコンアタッチメントを組み合わせることで、両端で太さの違う器具でもぐらつくことなく固定できます。



シリコンアタッチメントARM用は手術ロボットアームの固定に特化した形状です。「Clean Basket ARM」に取り付けてご利用ください。※チラシ裏面をご参照ください。

### 商品の詳細



#### シリコンバー

- 外形寸法：W216 × D14 × H23mm
- ※突起部含む



#### シリコンアタッチメント

(2mm、4mm、6mm、8mm、ARM用)

- 外形寸法：  
(2mm、4mm、6mm、8mm) W30 × D19 × H35mm  
(ARM用) W30 × D19 × H41mm
- ※突起部含む

#### 販売形態（7パターンからお選びいただけます）

|                                      |                                       |                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CB-030<br>シリコンアタッチメント<br>2mm × 2個セット | CB-033<br>シリコンアタッチメント<br>8mm × 2個セット  | CB-036<br>フルセット<br>・シリコンバー…2本<br>・シリコンアタッチメント<br>2mm × 2個<br>4mm × 2個<br>6mm × 2個<br>8mm × 2個 |
| CB-031<br>シリコンアタッチメント<br>4mm × 2個セット | CB-034<br>シリコンアタッチメント<br>ARM用 × 2個セット |                                                                                               |
| CB-032<br>シリコンアタッチメント<br>6mm × 2個セット | CB-035<br>シリコンバー<br>× 2本セット           |                                                                                               |

販売・製造元



株式会社 シンドー

〒959-1288 新潟県燕市燕 5525-1 TEL 0256-63-2566 / FAX 0256-64-2812  
http://www.shindo1947.com/ http://www.shindo-net.jp/

●材質：シリコン樹脂 ●耐熱温度：180℃ ●日本製

※過酸化水素を用いた滅菌を行う場合、商品に過酸化水素が残留する恐れがありますので、ご注意ください。