


車椅子に乗ったお客様が、介助無しでもバイキングを楽しめます！

車椅子用 バイキング トレイホルダー

バイキングトレイホルダーを車椅子に取り付ける事で
トレイを持ちながら移動する必要がなくなります。
車椅子のお客様にも
気持ちよくバイキングを楽しんで頂けます。

車椅子の方への
バリアフリー ニーズは
年々高まっています。
お客様の「また来たいね」の
笑顔に繋がる
思いやりの気持ちを形にできる…
そんなご提案です。

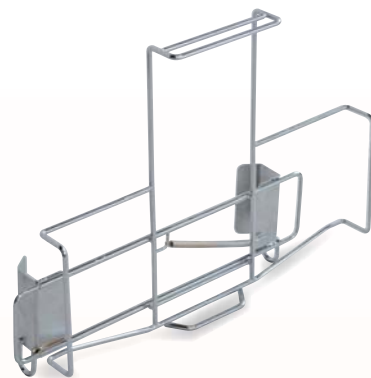

対応トレイサイズ

たて **350mm**まで
×
よこ **450mm** まで

両手が空いて
配膳・移動が
スムーズに

床に置けば
自立します

車椅子に
座ったまま
着脱可能

取付は簡単 3 ステップ



1. 片側のツメ部を車椅子の
ひじ掛けに引っ掛けます。



2. 反対側のツメ部取手を
引っ張ります。



3. 反対側のツメ部をひじ掛け
に引っ掛けて取付完了です。

※ホルダーの上にトレイを置いたままの食事はできません。
※車椅子の種類によっては取り付けできない場合があります。

※左右逆でも着脱可能です。

取付可能な車椅子形状

座面幅

380mm
～
450mm
に取付可能



肘掛け形状

- 肘掛け先端～支柱まで
100mm以上
- 肘掛け厚み(パイプ含む)
22mm～44mm に取付可能



製造販売元

SHINDO 株式会社 シンドー

〒959-1288 新潟県燕市燕 5525-1
TEL: 0256-63-2566 Mail: sales@shindo1947.com
FAX: 0256-64-2812 Web: http://www.shindo1947.com/

※品質改良の為、製品の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※印刷の都合上、製品の色が写真とは異なる場合があります。予めご了承ください。

車椅子用バイキングトレイホルダー

品質表示

材 質 / 本体: 鉄(クロムめっき)・部材: 18-8 ステンレス
サイズ / 約 366×497×115mm
重 量 / 約 1.3kg
耐荷重 / 2kg

MADE IN JAPAN